



Dernière mise à jour le 21/08/2025



L'entreprise, **Mist Studio**

- Studio de développement spécialisé dans les **technologies immersives**
- Autour de trois axes : **santé**, formation, sensibilisation
- Développement d'un **dispositif médical** : AURORIA



Le dispositif médical, **AURORIA**

- Jeu thérapeutique en réalité virtuelle
- Dispositif médical de classe I
- Avec un focus pédiatrique



INDICATIONS



- ✓ Gestion de la douleur (faible ou intense)
- ✓ Apaisement des soins difficiles
- ✓ Amélioration de l'expérience de soin



Tous patients de plus de 5 ans révolu




A chaque étape du parcours de soin

- bloc opératoire lors d'interventions chirurgicales sous anesthésie loco-régionale,
- en soins infirmiers pré- et postopératoires,
- lors d'examens invasifs
- en centre de rééducation

CONTRE INDICATIONS

- Trouble psychologique et neurologique important
- Epilepsie
- Déficience visuelle, auditive, cognitive et/ou motrice
- Blessure au visage
- Réticence à l'utilisation
- Âgé de moins de 5 ans

 Respecter les restrictions et consignes prévues dans certains locaux/services de l'établissement visant à limiter ou éviter l'utilisation d'appareils radioélectriques.



Présentation du **kit AURORIA**



Casque



Tablette



Recharge




Cable de
recharge



Piles
+
chargeur

Protection

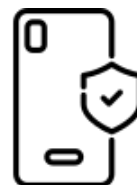

Coque
accessoires

Protection
silicone

Carte d'accès à la notice &
SAV



INSTALLATION





Préparation de la **tablette**

1




Déverrouiller la
tablette et entrer
le mot de passe



2




Vérifier la
connexion
Internet

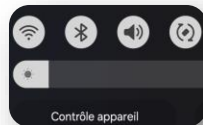

3




Lancer
l'application
AURORIA

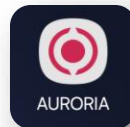

4



Se connecter
/ créer un
compte patient

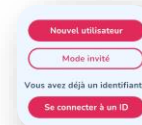

5



Indiquer l'adresse
IP affichée côté
casque





Préparation du casque

1



Allumer le casque,
vérifier qu'il est
connecté sur le
même réseau que la
tablette



2



Définir la zone de
jeu



3



Activer la mise en
miroir



4



Démarrer
l'application
Auroria



5




Renseigner
l'adresse IP qui
s'est affichée, sur
la tablette





Messages d'accueil

1 Valider les messages d'accueil

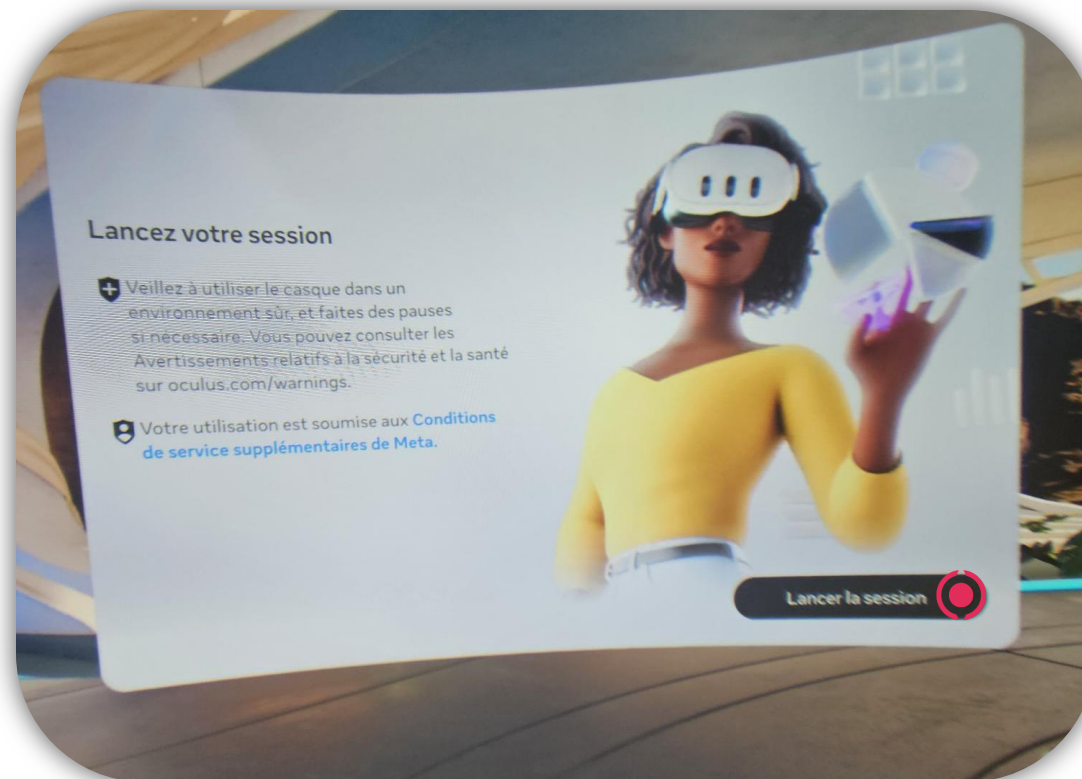



Définir la zone de jeu

Définir la limite de jeu

Limite introuvable

Veuillez créer une nouvelle limite pour votre espace dégagé. Faites toujours attention à vos alentours quand vous vous déplacez en mode Caméra réelle.



Créer une nouvelle limite

Continuer en Caméra réelle



Limite stationnaire

Une limite stationnaire est suggérée en fonction de votre espace libre disponible. Assurez-vous qu'il n'y a rien autour de vous que vous pourriez heurter avec vos bras, vos jambes ou votre tête.

Confirmer



Choisir votre limite



Dessiner ou placer votre propre limite

Dessinez une limite roomscale pour des expériences qui nécessitent que vous vous déplaçiez. Vous pouvez également placer une limite stationnaire pour les expériences assises ou debout.




Roomscale

Stationnaire


Définir la limite de jeu

Etape 1 : confirmer le niveau du sol

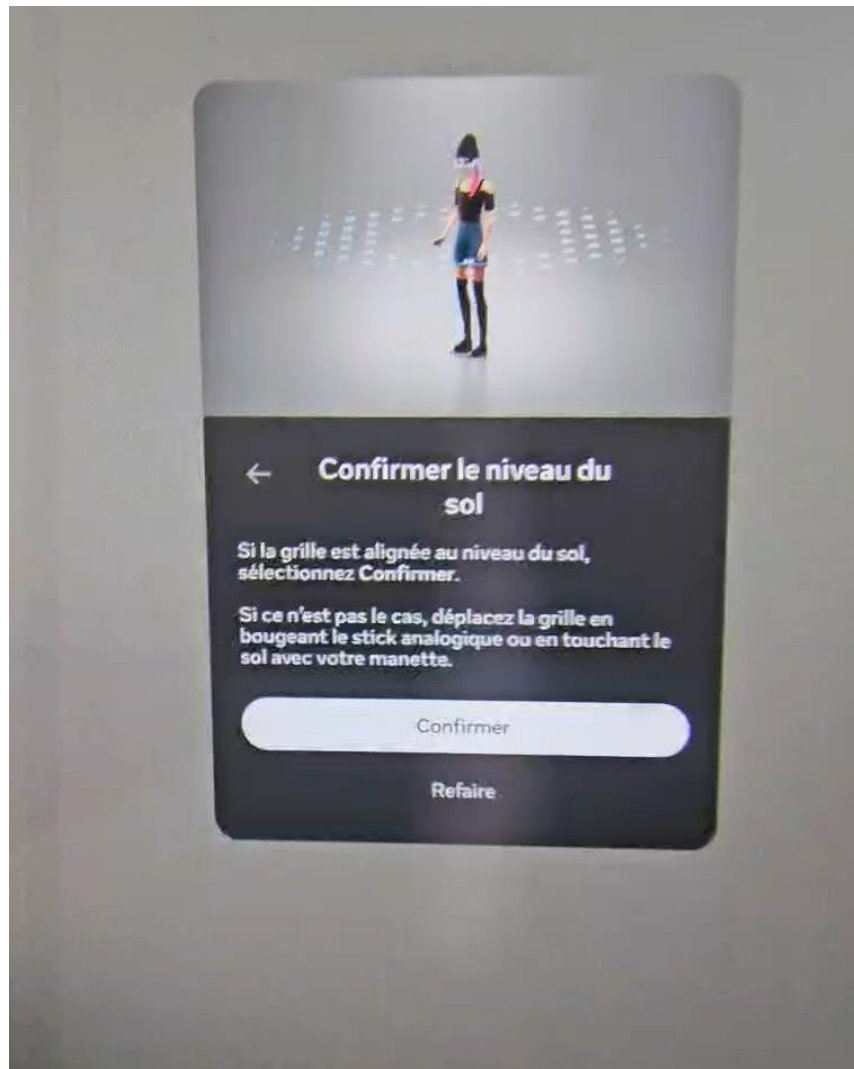

Définir la limite de jeu



Etape 2 : définir la zone

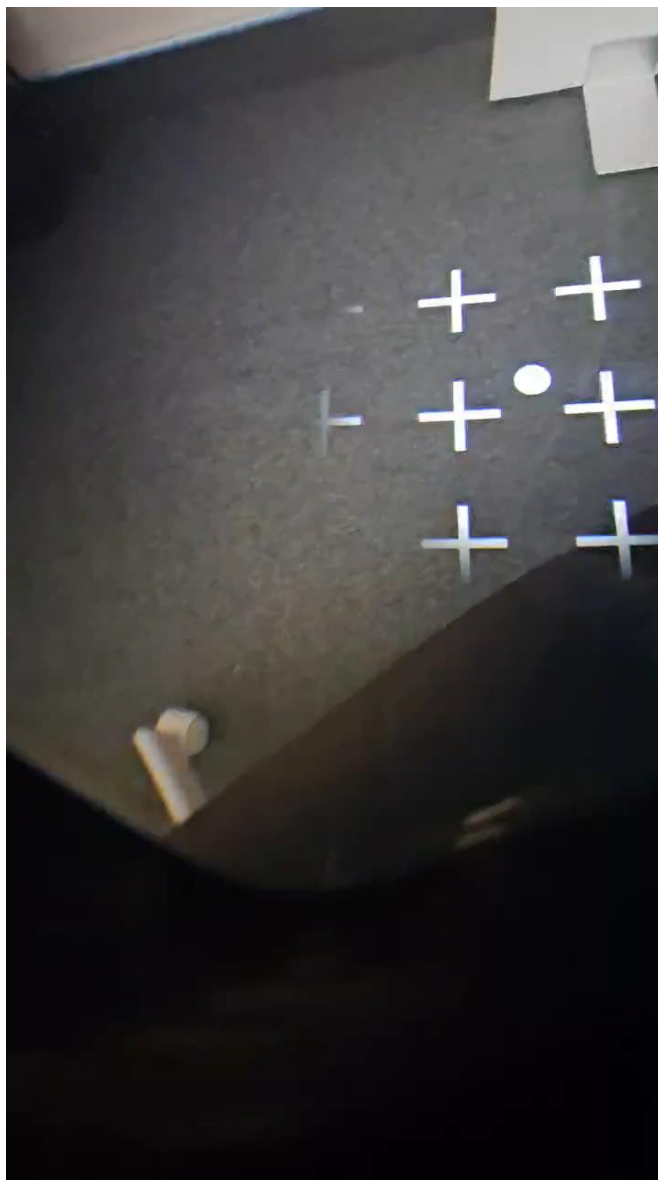



Utilisation du casque

Interface du casque : mise en miroir

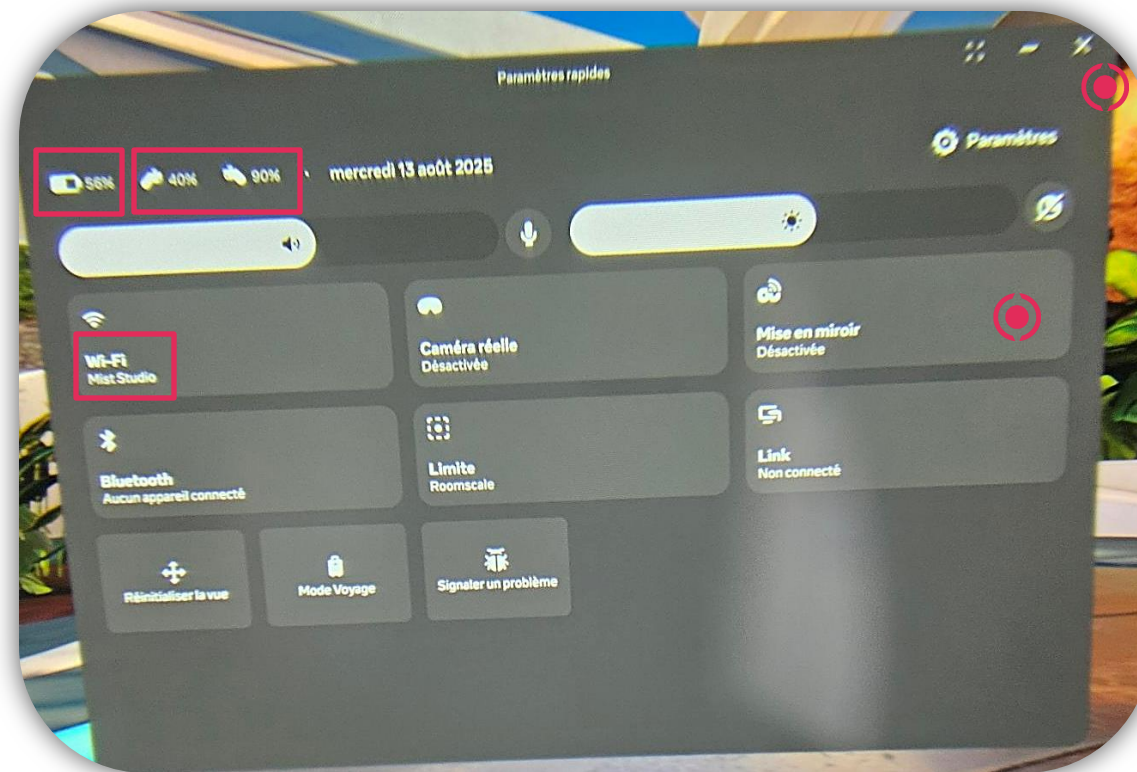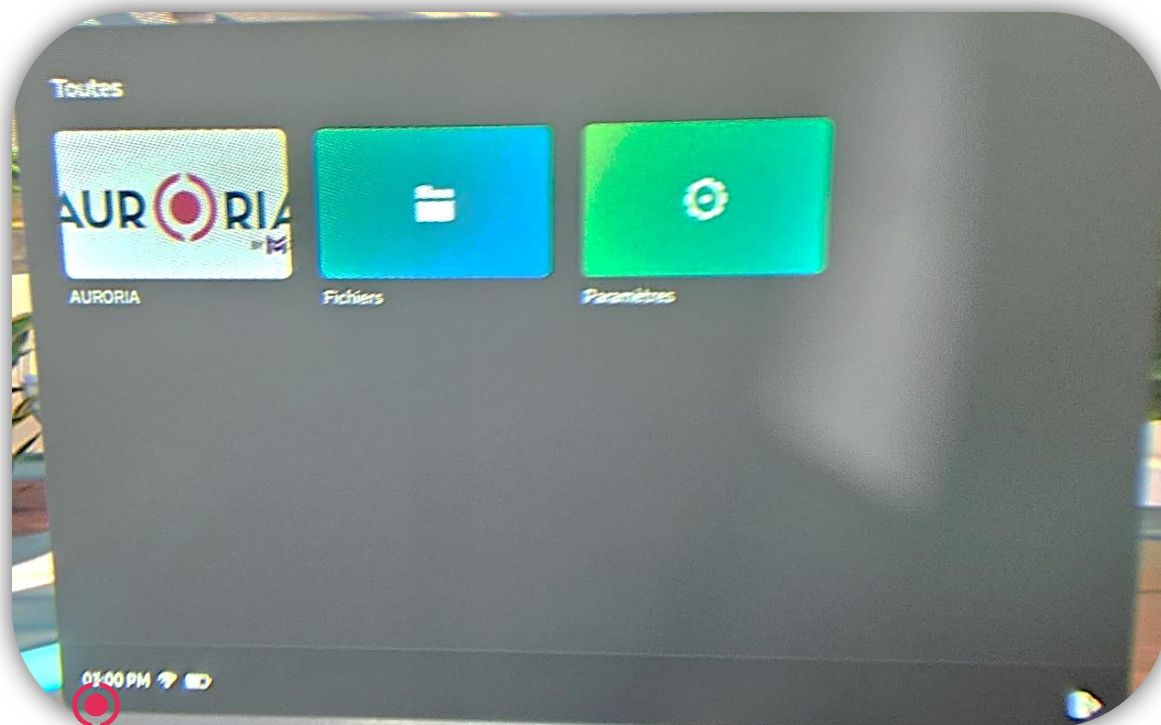

L'application mobile : mise en miroir

AURORIA



Mode simplifié



Mode direct

Entrez le code à **6 caractères** affiché sur l'écran "Mettre en miroir" de votre casque.



Ouvrir les instructions

Confirmer

En attente de synchronisation ...

AURORIA
BY MIST

1.0.9

Nouvel utilisateur

Mode invité


Vous avez déjà un identifiant ?

Se connecter à un ID



Besoin d'aide ?

Lancer le jeu

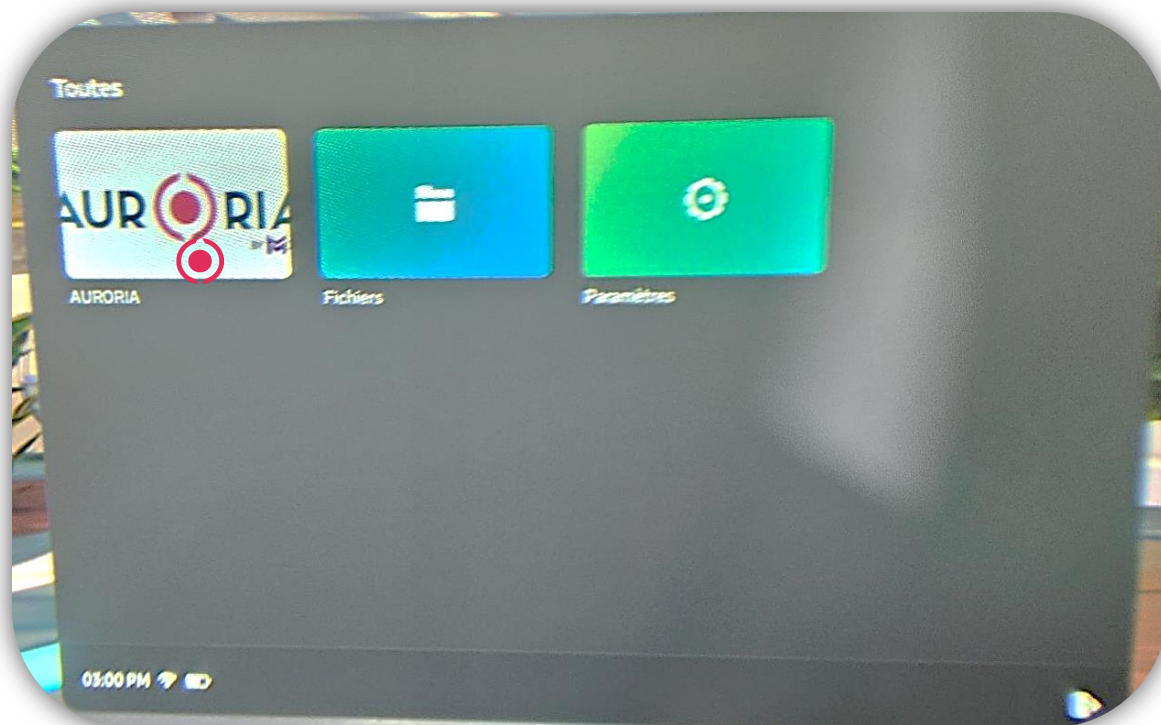



Préparation du casque

1



Allumer le casque,
vérifier qu'il est
connecté sur le
même réseau que la
tablette



2




Définir la zone de
jeu



3



Activer la mise en
miroir

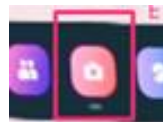

4



Démarrer
l'application
Auroria



5



Renseigner
l'adresse IP qui
s'est affichée, sur
la tablette





Installation du **casque** sur le patient



Desserrer au maximum la sangle du casque



Placer le casque sur la tête du patient en commençant par les yeux




Ajuster le casque en serrant la molette à l'arrière du casque



Ajuster la vision dans le casque de VR en appuyant sur le bouton Meta de la manette



Maintenir : recentre la vue

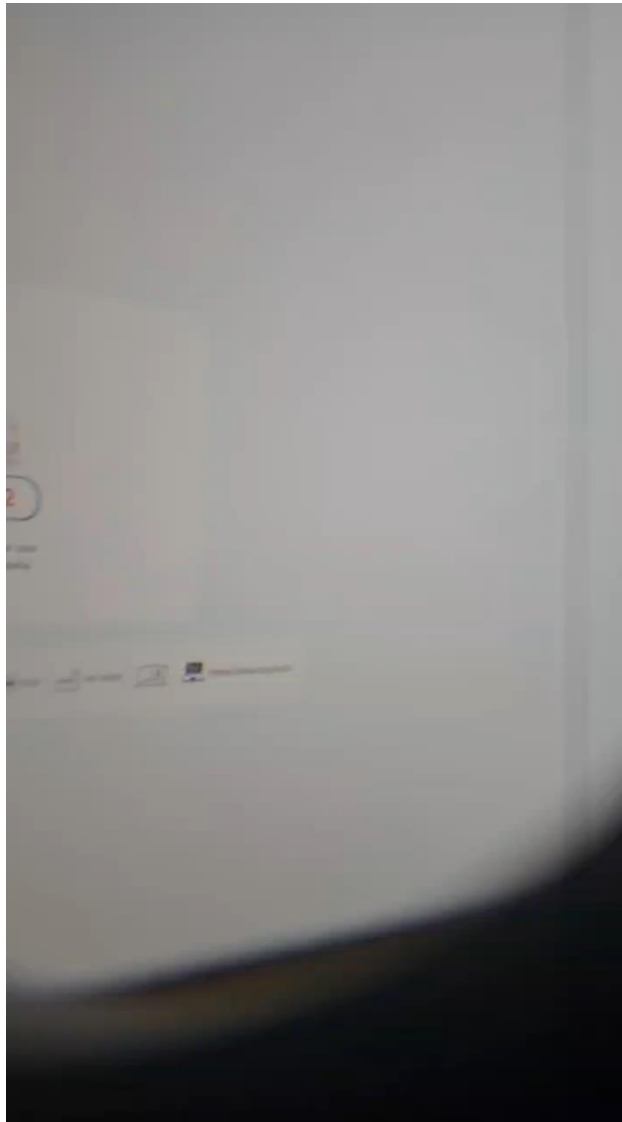

APPLICATION TABLETTE





L'application mobile : retour au QG




L'application mobile : page Menu

	Mode Aventure	Liste des Focus
Quoi ?	Mode par défaut Permet de sélectionner les niveaux de l'histoire	Les événements distractifs catégorisés
Qui ?	Tous les patients	Tous les patients
Quand ?	Dès le début du soin	En anticipation d'un geste douloureux ou pour calmer un état anxieux






L'application mobile, pages contenu & activités

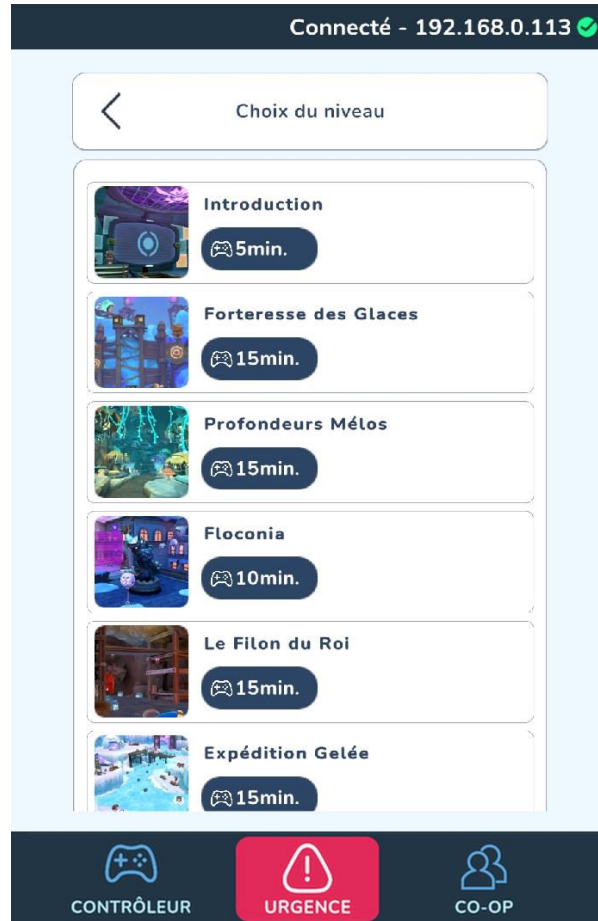



Fonctionnalités

L'application mobile : choix du mode de jeu

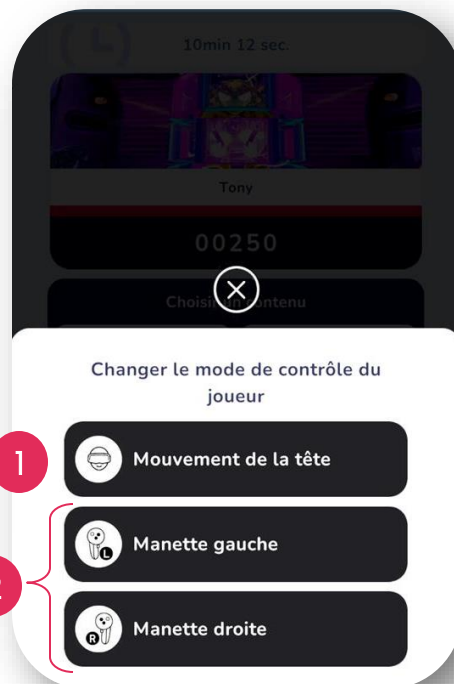



L'application mobile : page coopération





Fin du soin




Fin du soin

Appuyer : afficher le menu

Vérifier la batterie (casque et manette)

Eteindre

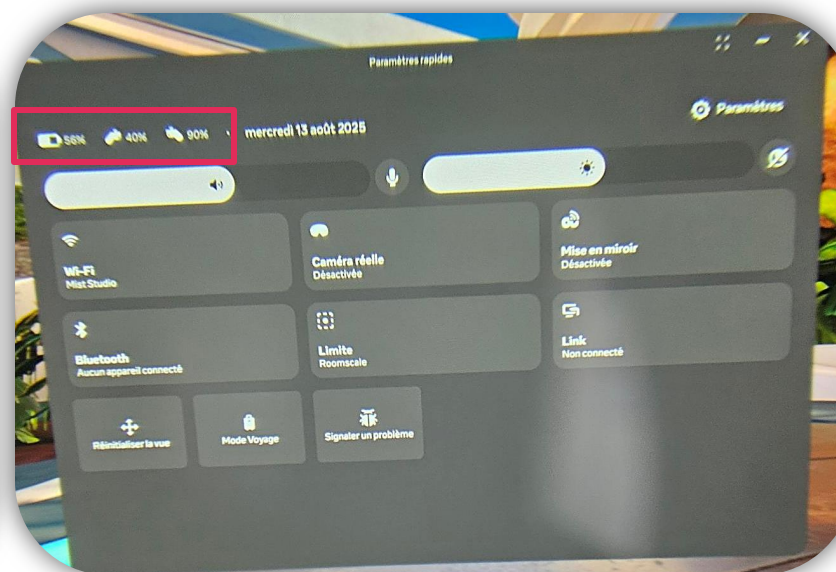

PROBLEME & SOLUTION





Accès au menu



**Vous souhaitez
accéder au menu du
casque pendant le jeu ?**

Manette droite



Appuyer : afficher le menu





Calibrer la vue



**Le patient n'est pas
placé correctement
dans son vaisseau ?**

Manette droite





Maintenir : recentre la vue





Être hors de la zone de jeu

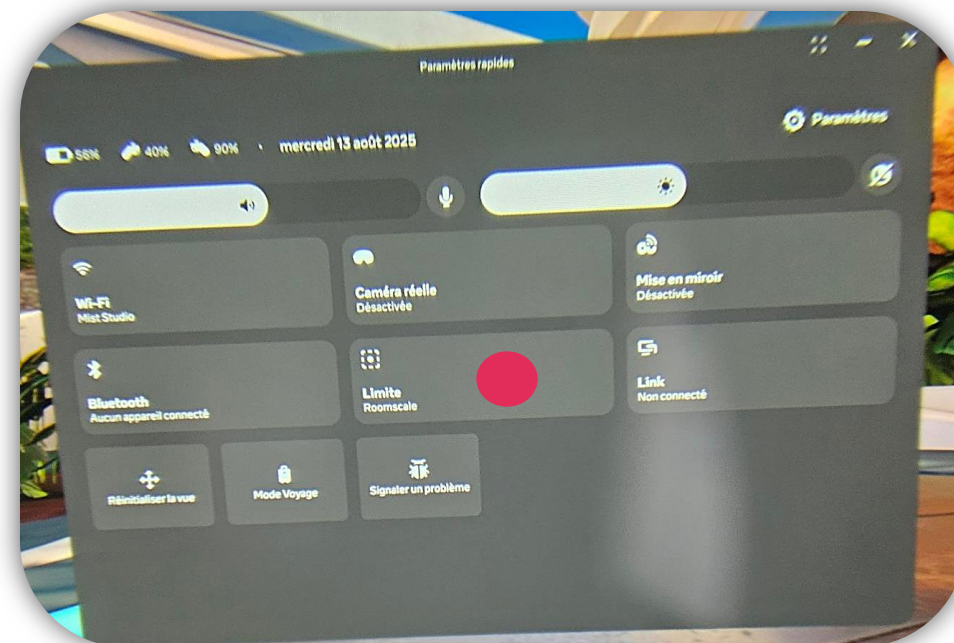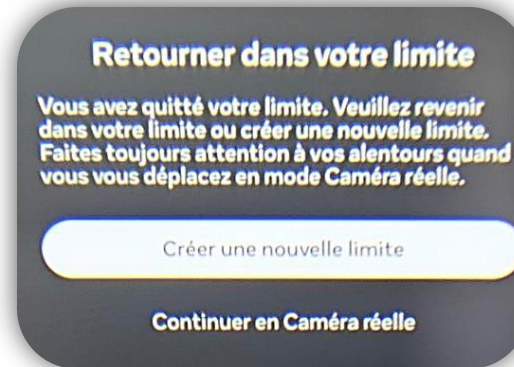


Problème de connexion – niveau tablette

1

Vérifier que :


Désactivé

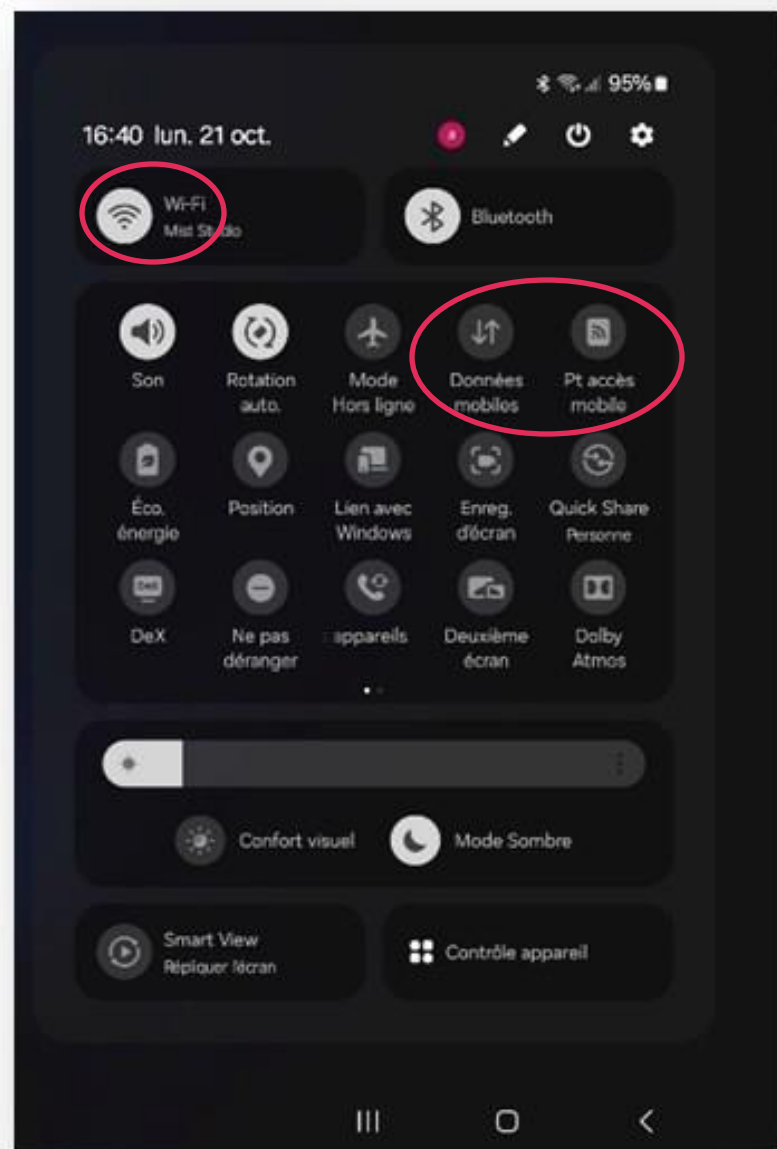

Activé

Partage de connexion – niveau tablette

2 Vérifier que la connexion entre le casque et tablette soit la même

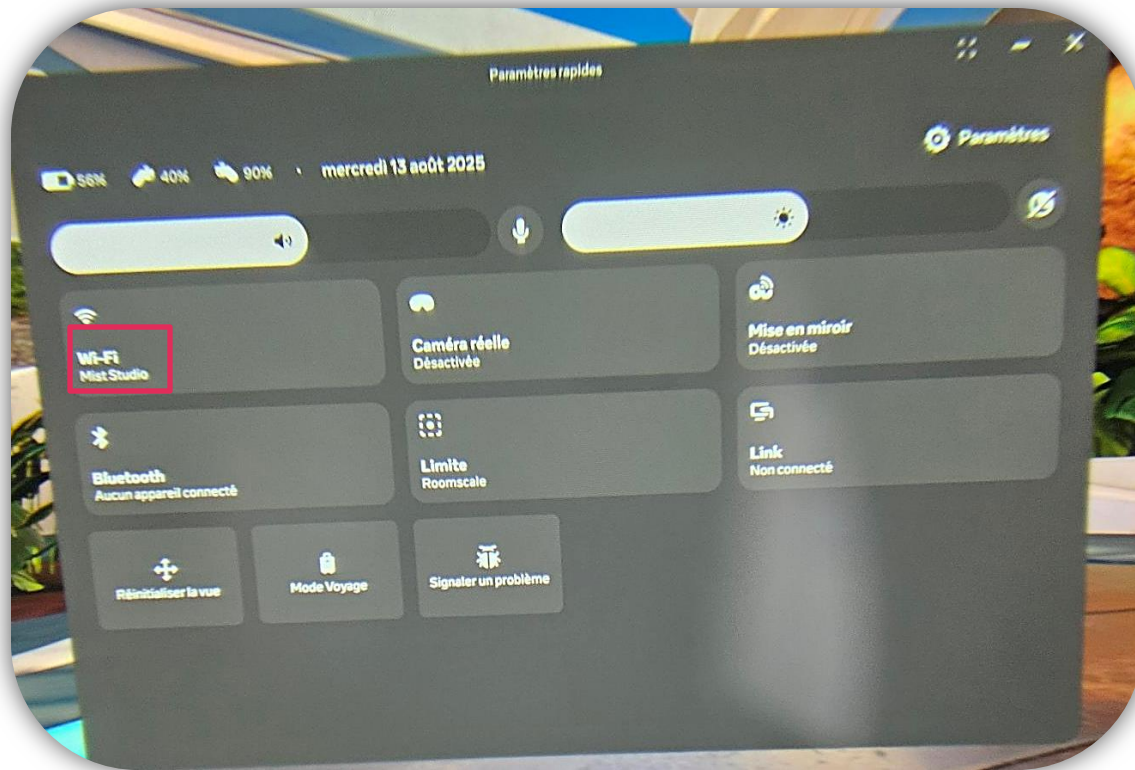



Documents

Documents à disposition :

- ✓ **Instruction d'utilisation du produit** (IFU), guide complet qui regroupe tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour utiliser AURORIA,
- ✓ Le descriptif des **niveaux de jeu**,
- ✓ **Flyer mémo**, résume les étapes d'installation



Merci de votre attention !



Prêts à plonger dans l'expérience ?
Nous sommes là pour vous accompagner !

Aidez-nous à nous améliorer !

**Un rapide questionnaire est
disponible en scannant le QR Code ci-
dessous**





Connexion accès mobile





Partage de connexion – niveau tablette

Problème de point d'accès mobile



Aller dans
« Paramètres »

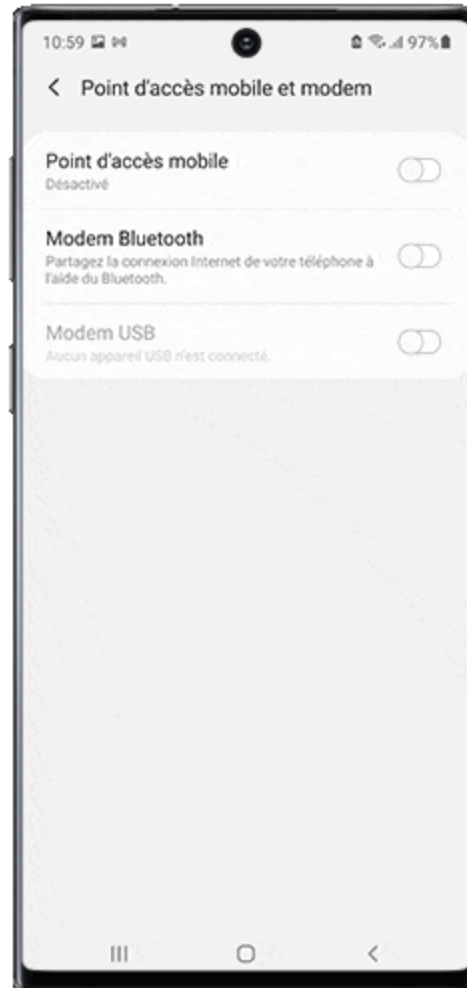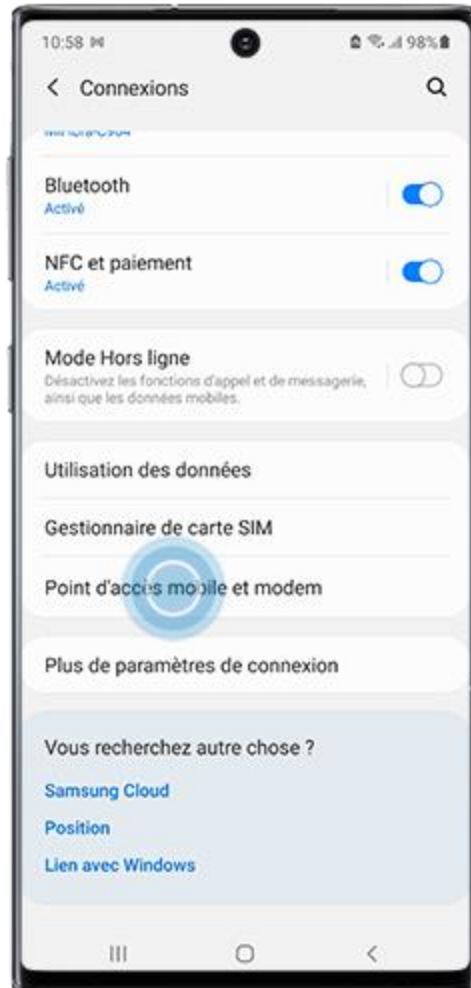

Sélectionner « Aucun
délais d'expiration »





Partage de connexion – niveau casque

